


הנחיות להפעלת מכשיר RF ידני מואף EMS, כטט ואור ביודינמי לשימוש ביתי

תוכן

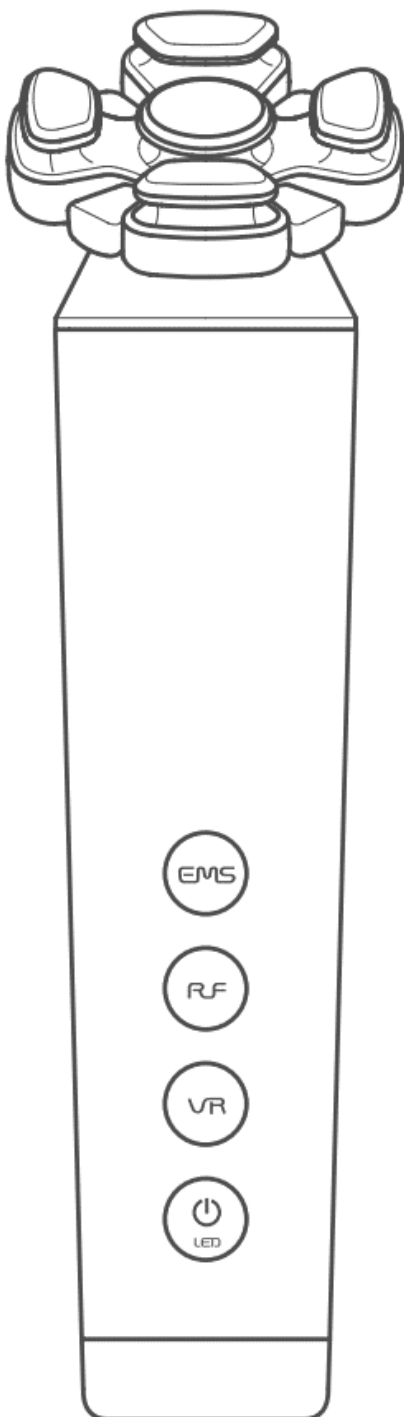

- על המכשיר:.....2
- תרשים המכשיר:.....2
- מאפייני חומרי היחידה המרכזית:.....2
- בטיחות:.....2
- סוגי האזהרות במדריך זה:.....3
- אזהרות, סכנות, ואיסורים:.....3
- מקרים המחייבים התייחסות:.....4
- לפני הטיפול:.....4
- תכולת האריזה:.....4
- טעינה:.....4
- מקשי המכשיר:.....5
- שלבי הטיפול:.....6
- טיפול מומלץ לקמטים:.....6
- טיפול מומלץ למתיחה:.....7
- טיפול מומלץ משולב לקמטים:.....7
- טיפול מומלץ לקמטים בשילוב אור ביודינמי:.....8
- טיפול מומלץ לעור זוהר וחלק:.....8
- טכניקות עבודה:.....9
- נתונים טכניים:.....9


על המכשיר:

מכשיר לטיפול יופי המשלב טכנולוגיה של גלי רדיו עם טכנולוגיה של זרמי EMS, רטט ואור אדום/ירוק/כחול. גלי הרדיו חודרים לשכבת הדרמיס לגירוי ועידוד יצירת קולגן, זרמי המתח הנמוך המגרים את העצבים הפריפיליים גורמים לתזוזת העור. הידוק ומתיחת העור מעולם לא הייתה נוחה יותר בשילוב של 4 הטכנולוגיות של גלי רדיו, זרמי מיקרו, רטט עם אור ביודינמי.

חימום העור המהיר המתבצע בתדירות של **1MHz**, עם מוליך גלים מתקדם אולטרא דק בעל ג'ל סילקוני נוזלי מביא לאפקט חזק יותר עם שטח טיפולי גדול ובעל מוליכים ארגונומיים המותאמים לעור הפנים, סוללה בעל קיבולת גדולה (לשימוש של עד שעה

רצופה), ועמידות למים בתקן **IP67** לניקוי ותחזוקה קלים. המשתמש יכול להתאים את הטיפול המתאים למצב העור הדרוש בהתאם לצרכים.

תרשים המכשיר:

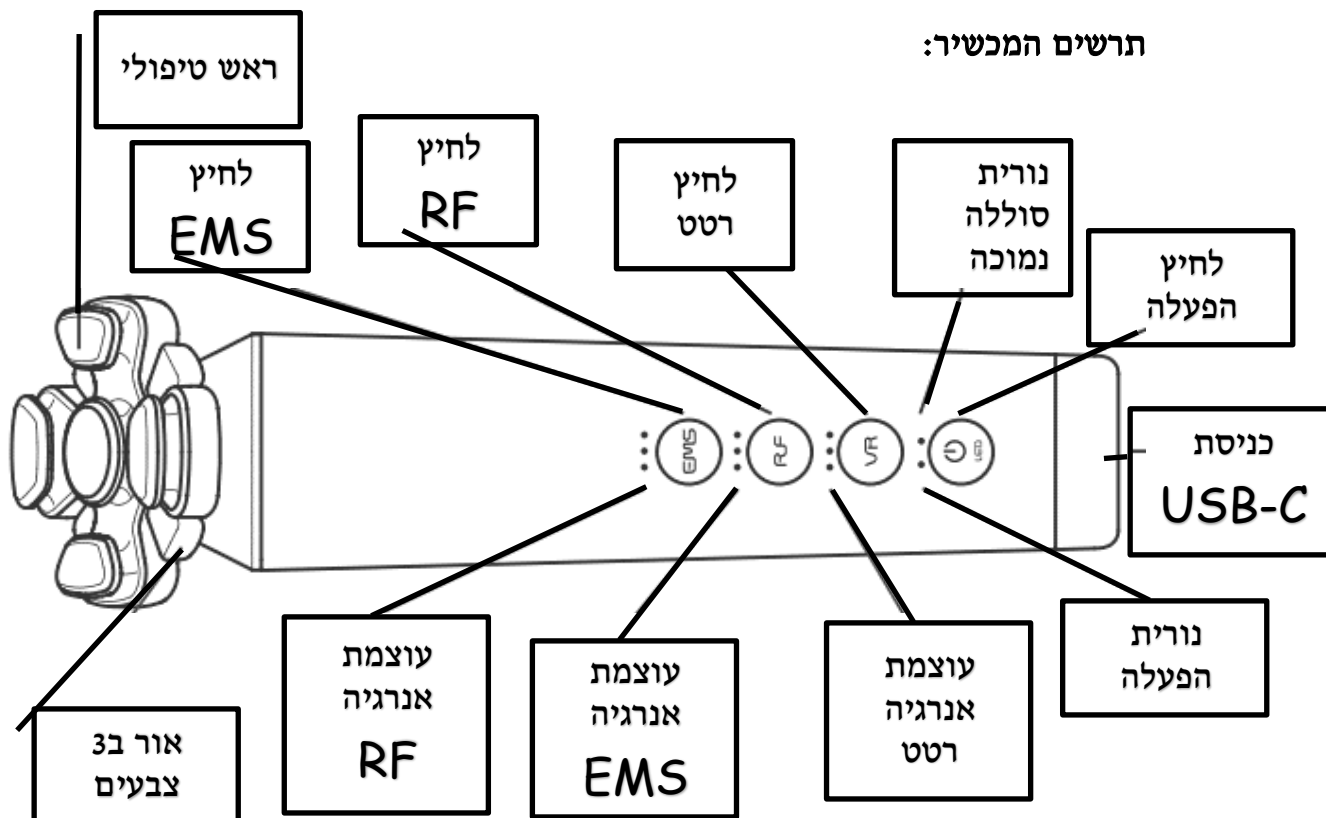

מאפייני חומרי היחידה המרכזית:

המכשיר בנוי משילוב של אקרילוניטריל בוטאדיאן סטירן + פוליקרבונט, PC, ABS, נירוסטה, וחומרי הדבקה ומוליכים, מיוצר בתהליכי יצור מתקדמים הכוללים, הדפסה, UV, ציפוי בכרום, חריטת רדיום ועוד.

בטיחות:

לפני השימוש יש לקרוא בעיון הוראות אלו לאפשר שימוש נכון ובטוח במכשיר.



במקרה של תקלה או התנהגות שאינה רגילה יש להפסיק מייד את השימוש במכשיר ולהביא אותו לבדיקה/תיקון/החלפה במעבדה מוסמכת בלבד.
יש לעקוב אחרי ההנחיות המופיעות במדריך זה.
מומלץ לשמור עותק זה של ההוראות במקום בטוח לשימוש עתידי.
סוגי האזהרות במדריך זה:

אסור- שימוש בניגוד לאיסורים עלול להביא לנזק ו/או פציעה. 

סכנה- שימוש בניגוד להנחיות עלול לגרום לסכנה ולהביא לנזק ו/או פציעה. 

אזהרה- שימוש בניגוד לאזהרות עלול להביא לפציעה ו/או נזק לרכוש. 

אזהרות, סכנות, ואיסורים:

המוצר אסור לשימוש על ידי אנשים החולים בתסמונת הכשל החיסוני הנרכשת, מושתלי ריאה, אנשים עם עבר של גידולים סרטניים, מושתלי קוצב לב.
האנשים הבאים צריכים להשתמש במוצר בזהירות, למניעת תאונות אשר עלולות לפגוע בעור ובגוף:  

- אנשים עם כיבים בעור.
- שלפוחיות בעור.
- עור קשקשי.
- כוויות שמש קשות.
- שתלים בעור.
- החלמה מניתוח קוסמטי.
- אנשים במהלך טיפול דנטלי חודרני.
- שימוש ארוך טווח בהורמונים או סטרואידים.
- הפרעה הגורמת להרס קפילרות.
- רגישות לכאב.
- החלמה מפציעה נרחבת בעור.
- שיניים או חלקים אחרים בפנים המכילים מתכות.

אין להשתמש במכשיר בנסיבות הבאות:



- אין להטעין את המכשיר בסביבה רטובה, לחה, ליד מקור אש, סביבה חמה כדי למנוע התלקחות העלולה לגרום לנזק.
- במקרה של תקלה יש להוציא את המכשיר מרשת החשמל בצורה מיידית.
- אין לנקות עם חומרים המכילים ריכוז גבוה של אלכוהול, בנזין, אצטון וממסים למניעת נזק לגוף המכשיר.
- מומלץ להפעיל את המכשיר ברמת אנרגיה נמוכה ולעלות לפי הצורך והסיבולת האישית.
- במקרה של כשל לא צפוי- יש להפסיק מיד את השימוש.
- אין לכוון את אור המכשיר לעיניים – למניעת גירוי העין.
- אין להשתמש במכשיר זה בשילוב עם מכשירים חשמליים נוספים משום סוג.




מקרים המחייבים התייחסות:

במידה והמכשיר אינו נדלק- רמת המתח נמוכה מדי ויש להטעין את המכשיר, המכשיר מכבה את עצמו כדי להגן על הסוללה ולמנוע ריקון מלא.
המכשיר אינו נטען- יש לוודא כי המכשיר נמצא במקום, כבל הטעינה במום ומחובר לרשת החשמל, ושנורית הטעינה עובדת.
במידה והעוצמה נמוכה- יש להעלות את העוצמה, יש להוסיף ג'ל להולכה טובה יותר של האנרגיה, יש לקחת בחשבון שערכי ההתנגדות של כל עור שונה במעט וייתכן שלקוח מסוים ירגיש הרגשה שונה מאותה רמת אנרגיה.
במידה והעוצמה גבוהה/מדגדגת- מומלץ להתחיל מעוצמה נמוכה ולהעלות את העוצמה לפי הצורך וסיבולת הלקוח, יש לוודא כי יש מגע מלא בין המכשיר לפניס.

לפני הטיפול:

מריחת ג'ל- לפני השימוש במוצר יש למרוח ג'ל על העור בכמות מספקת המאפשרת מעבר חלק של האנרגיה על העור.
במידה וראש המכשיר אינו מחליק על העור יש להוסיף שוב/עוד ג'ל על העור.
יש לוודא כי כניסת ההטענה תואמת לכבל ההטענה (USB type C).

תכולת האריזה:

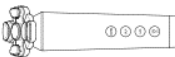מספר	שם	איור	כמות	מידה
1	מכשיר		1	יחידה
2	הוראות		1	יחידה
3	כבל סוג C		1	יחידה
מומלץ להוסיף	ג'ל		1	יחידה

במידה והאריזה הגיעה ללא אחד מהחלקים-יש לפנות למרכז שירות מוקדם ככל האפשר.


טעינה:

יש להטעין את גוף המכשיר לפני השימוש הראשון, מטרת הטעינה הראשונית הינה פיצוי על פריקת הסוללה מאז תהליך הייצור והגדלת תוחלת החיים של סוללת המכשיר.

כאשר הטעינה במצב נמוך- לחצן העוצמה מהבהב באור אדום.
בזמן טעינת המכשיר הלחצן מהבהב באור ירוק.
כיבוי אוטומטי לאחר 10 דקות של עבודה- רטט קל של כחצי שניה.
החלפת פונקציה- רטט קל של כחצי שניה.



מקשי המכשיר:

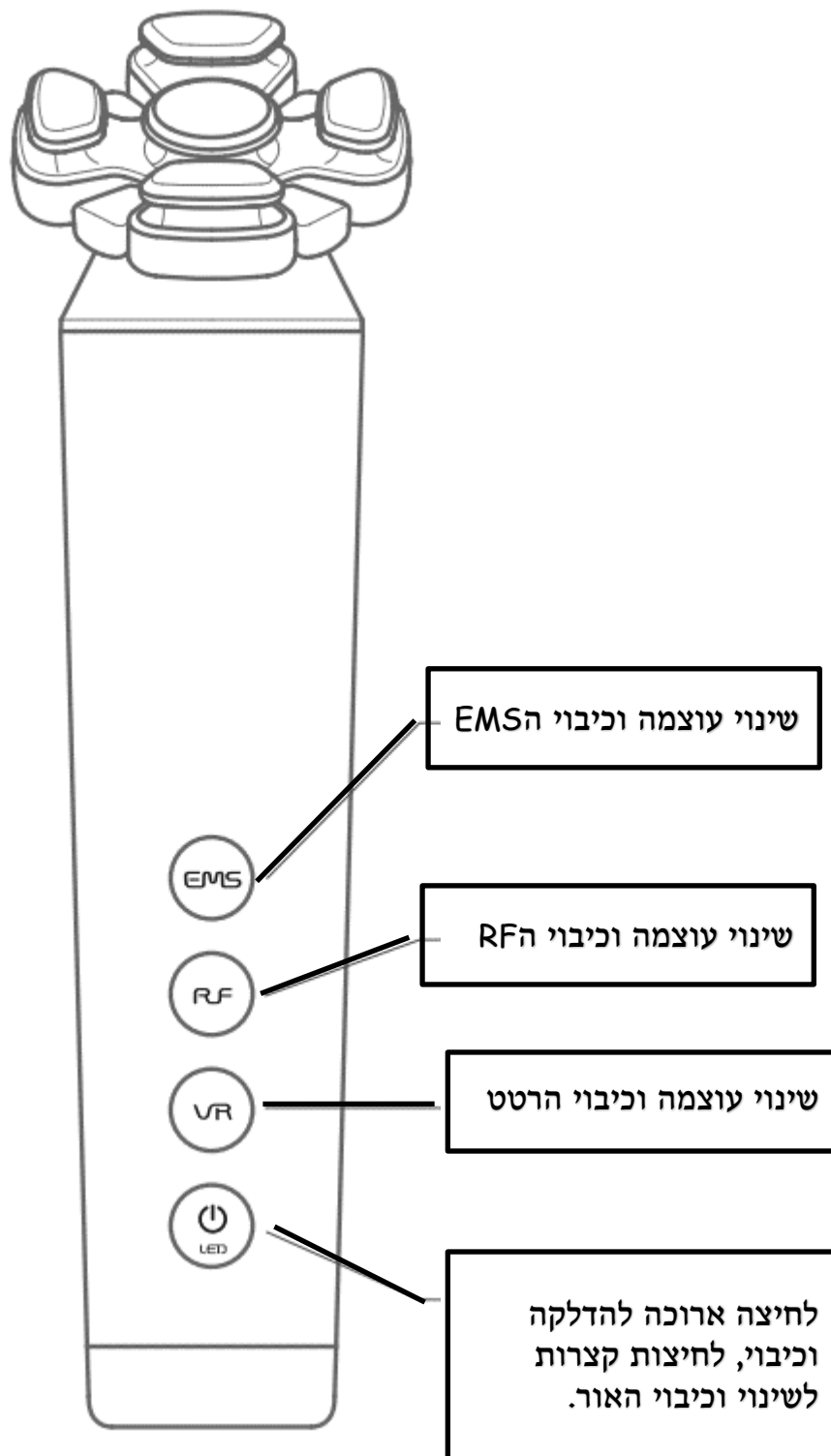



שילוב הטיפול:

ניקוי- יש לנקות את הפנים ביסודיות ולהתאים את הדטרגנט המתאים לפנים ולצוואר.
ניגוב- לאחר הניקוי בעזרת מגבת רכה יש לנקות את האזור מעודפי הלחות.
מריחה- יש למרוח ג'ל על הפנים בשכבה דקה ומספקת.

טיפול RF- יש להדליק את פונקציית גלי הרדיו. הפעלה בעוצמה נמוכה והגברה לפי הצורך ומהירות המעבר על הפנים.

השימוש בגלי הרדיו מביא את האנרגיה לדרמיס לגירוי יצירת קולגן וטיפול בקמטים.


טיפול EMS- יש להחליף לפונקציית הEMS (גלי הרדיו נכבים אוטומטית), הפעולה בעוצמה נמוכה והגברה לפי הצורך לחיזוק השרירים ומתיחת העור.
רטט – לאחר הטיפול או בו זמנית ניתן להפעיל רטט נעים בהתאם להעדפה.

שילוב אור ביודינמי- בזמן הטיפול בגלי הרדיו/EMS ניתן לשלב טיפול באור ביו דינמי אדום, כחול וירוק.

אור אדום משמש להמרצה והגברת ATP בתאים, אור כחול משמש להרגעה, אקנה וכו ואור ירוק משמש בטיפול היפר פיגמנטציה ועור לא חלק.
לניקוי המכשיר ניתן לנקות בעזרת מטליות לחות- יש לשים לב כי אמנם גוף המכשיר עמיד למים אך את שאריות הג'ל בין מרווחי האלקטרודות מומלץ לנקות עם מקלוני אוזניים.

טיפול מומלץ לקמטים:


הטיפול מוגבל ל10 דקות לכל הפנים ומומלץ לביצוע לסירוגין (יום כן/יום לא)

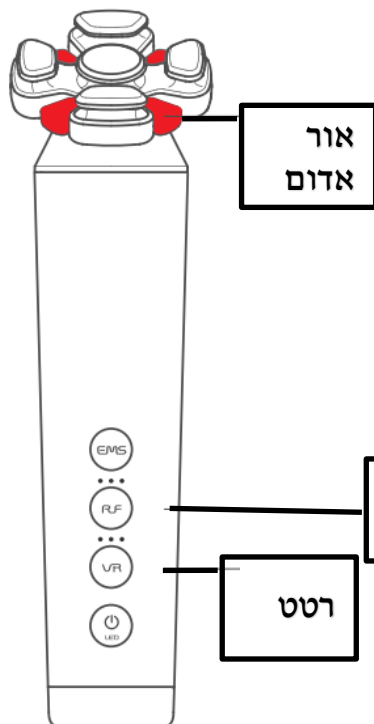



שימוש בגלי רדיו עם אור ביודינמי אדום ל10 דקות.
השימוש ברטט בזמן הטיפול אפשרי בהתאם לרצון.



טיפול מומלץ למתיחה:
טיפול מוגבל ל10 דקות ומומלץ לביצוע יומיומי.

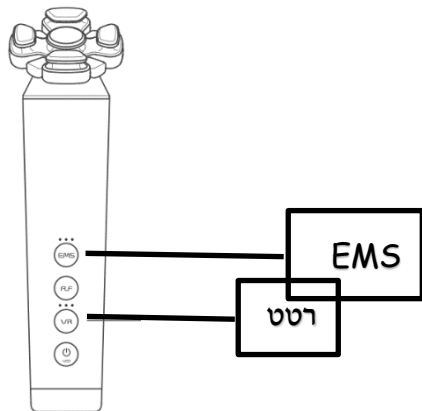

טיפול מומלץ משולב לקמטים:
טיפול יומיומי.
גלי רדיו עם/בלי רטט למשך 5 דקות.
שימוש בEMS ל10 דקות נוספות.
(עם/בלי רטט).

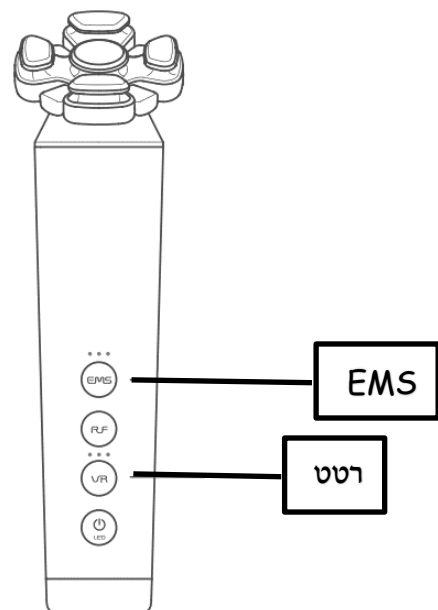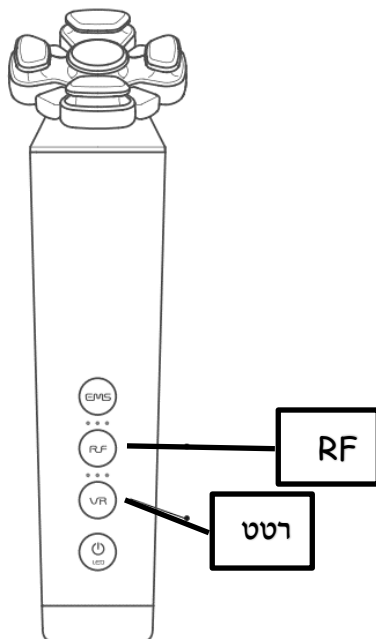



טיפול מומלץ לקמטים בשילוב אור ביודינמי:

טיפול יומיומי

גלי רדיו עם/בלי רטט למשך 5 דקות.


שימוש בEMS ל10 דקות נוספות.

(עם/בלי רטט).

שילוב של אור אדום להמרצה

שילוב של אור כחול להרגעה


שילוב של אור ירוק להיפרפיגמנטציה

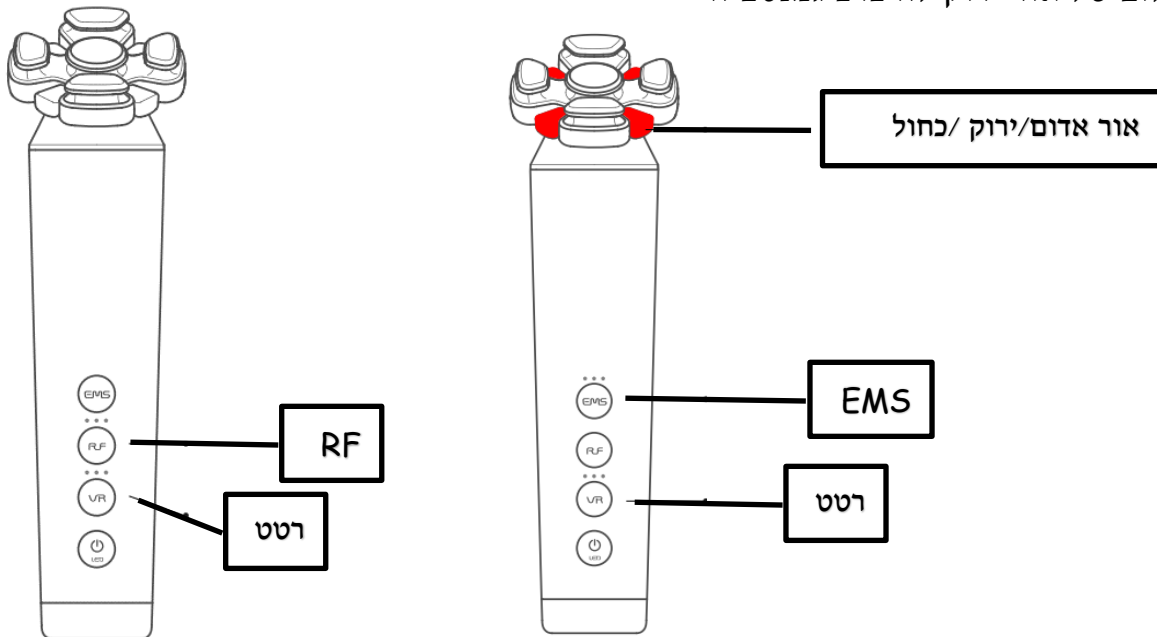

טיפול מומלץ לעור זוהר וחלק:

טיפול יומיומי

שימוש בגלי רדיו בשילוב עם אור ירוק או כחול ל10 דקות.

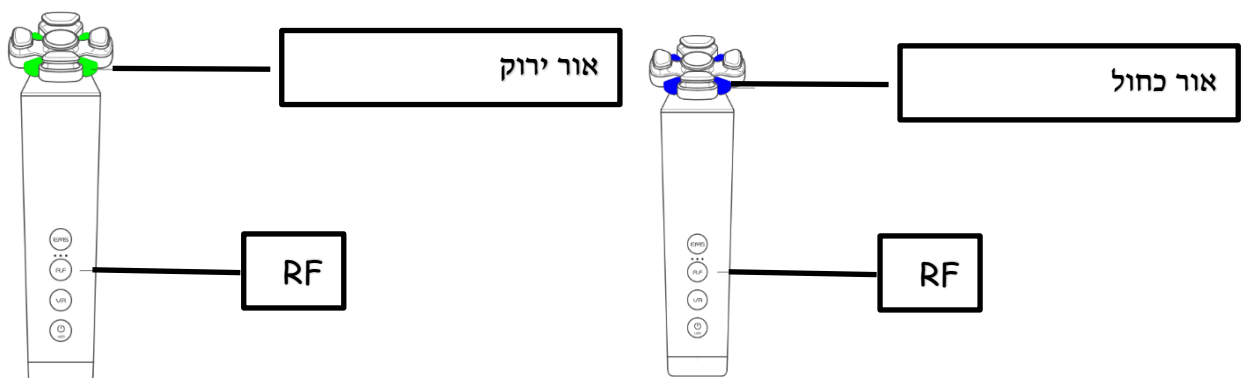



טכניקות עבודה:

יש למרוח ג'ל! תזוזה איטית מאזור הפה לכיוון האוזן 	יש למרוח ג'ל! תזוזה איטית מאזור הפה לכיוון האוזן 
יש למרוח ג'ל! תנועות עולות ויורדות באזור המצח 	יש למרוח ג'ל! תזוזה איטית מאזור הלסת לכיוון ארובת העין 

זמן עבודה מומלץ לכל צד של פנים הינו 5 דקות.
מומלץ למרוח ג'ל בכל אזור עבודה של הפנים, במידה והג'ל מתייבש לפני תום הטיפול,
מומלץ להוסיף שכבה נוספת.
לאחר 10 דקות של עבודה המכשיר נכבה בצורה אוטומטית ונדלק מחדש.

נתונים טכניים:

שם המכשיר: מכשיר RF ידני משולב EMS, רטט ואור ביודינמי לשימוש ביתי
משקל: 190 גרם

מידות: 183X52X54 מ"מ.

הספק: 9W

זמן טעינה: 2.5 שעות.

נפח סוללה: 2400mAh