




מסכת לד עוצמתית לפני
מתקן פוטותרפוי אטיבול לפני

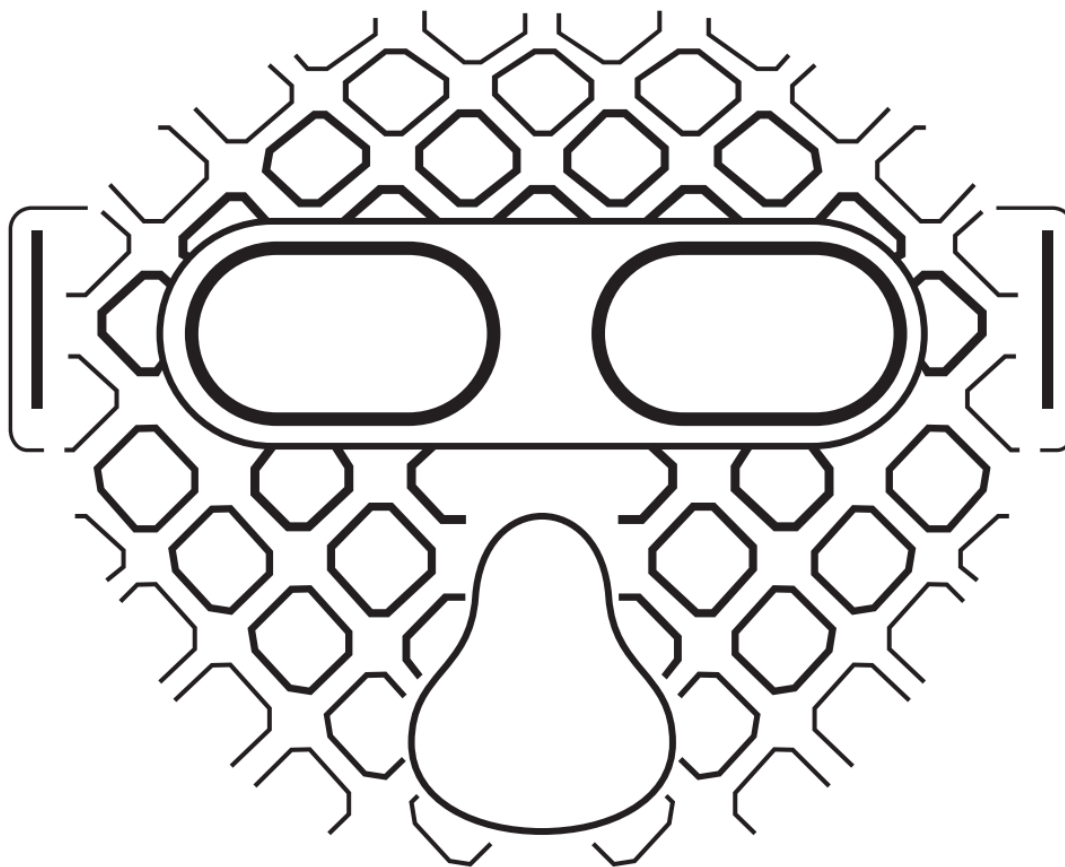

תודה שרכשתם את מסכת הליד לתרפיה וטיפול פנים.

אנו ממליצים לקרוא ולשמור את ההנחיות לשימוש במדריך זה לכל אורך חיי המוצר.

במוצר זה ישנם 3 סוגי תרפיית אור (אדום+ אינפרא אדום, כחול וצהוב).

אדום+ אינפרא אדום: בעל אורכי גל של 660nm+850nm.

אור זה חודר לעור בצורה העמוקה ביותר, חדירת האנרגיה לרקמות העמוקות חזקה יותר משאר הצבעים ובעלת אפקט חימום על הרקמה.

האור האדום מאיץ את זרימת הדם, מאיץ את חילוף החומרים, מגביר את הפעילות התאית, משפר מטבוליזם, מאיץ ייצור סיבי קולגן ומגביר את אלסטיות וחיוניות העור.

האור הכחול: בעל אורך גל של 415nm, משמש להרגעה ונחשב לאור מקרר.

האור הכחול עוזר בדיכוי הפרשת שומן ומסייע במצבי דלקת, חיטוי, השמדת חיידקי אקנה וטיפול בפצעים וצלקות.

האור הצהוב: בעל אורך גל של 590nm, מאיץ החלמת פצעים, ומסייע בספיגה של מוצרים קוסמטיים לעור.

אור אדום+ אינפרא אדום- בעל 3 עוצמות 1/2/3



אור כחול- בעל 3 עוצמות 1/2/3



אור צהוב – בעל 3 עוצמות 1/2/3



אריזת המוצר כוללת:



שלט הפעלה למוצר



מסכת לד פוטותרפית



חגורת ניילון מתכווננת



כבל USB C – מידע

יש להפעיל את המוצר ל-10-20 דקות על החלק הפנימי של הזרוע למשך 10-20 דקות ולהפסיק את השימוש במידה וישנה תחושת חוסר נוחות.



יש להמתין 4-5 שעות לאחר הטיפול ולהתבונן על העור- במידה וישנם סימפטומים כמו אדמומיות, גרד וכו לא ניתן להשתמש במוצר.

במקרה של רגישות לאור יש לפנות תוך 7 ימים לקבלת החזר כספי.

יש להחזיר את המוצר כשהוא באריזתו המקורית ללא פגיעות או שריטות.

לפני השימוש הראשון יש להטעין את המוצר עד לטעינה מלאה ולנתק את כבל הטעינה משלט ההפעלה.

יש לנקות ולייבש את הפנים, יש לוודא כי על הפנים אין חומרים קוסמטיים אשר אינם מיועדים לשימוש עם פוטותרפיה, בעיקר יש לוודא כי אין קרמים לבנים או חומרים המכילים SPF מכל סוג.

יש להרכיב את הכבל בין השלט למוצר (שימוש בכבל מקורי בלבד), ולהתאים את המסכה לפנים בעזרת חגורת הניילון.

יש ללחוץ על כפתור ההפעלה למשך 1.2 שניות (לחיצה ממושכת) עד להפעלת האור.

ניתן ללחוץ על לחיץ ה-Mn (לחיצה קצרה) כדי להתאים את האור לטיפול הרצוי. (המרצה/הרגעה/הבהרה ותיקון).

לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה תעלה את עוצמת האור ותחליף בין עוצמה 1/ עוצמה 2/ עוצמה 3.

מידות המוצר : 160X210X210 מ"מ

הספק: 4.7W

משקל: 93 גרם.

טעינה: DC 5V 1A

יש לנקות את המוצר בעזרת בד עדין ויבש ובמידת הצורך ניתן להשתמש באלכוהול 70% לכתמים עמידים.

אין להשתמש בכלים חדים, בדים גסים לניקוי המוצר.

יש לאחסן במקום קריר ויבש לאחר השימוש ולמנוע כניסת אבק.

אין למשוך את כבל ה-USB או לארוז את המסיכה או השלט כשהכבל מחובר אליה.

השלט מכיל סוללת ליתיום אלקטרונית ואין לאחסן אותו בסביבה חמה דליקה או נפיצה.

במקרה של תקלה יש להביא את המוצר למעבדת שירות מורשית.

פירוק ותיקון המוצר יעשה רק על ידי מעבדת שירות מוסמכת.

שבר/סדק/שריטות אינן מכוסות באחריות.

בעת הטעינה ראשונית (כשעתיים לערך) יש למלא את הסוללה עד לטעינה מלאה כששלושת האינדיקטורים מלאים.